

高カロリー輸液の交換方法 ～カフティポンプを用いた場合～



1. 外袋から輸液剤を取り出す。所定の方法で開封し、台の上に置く。

2. カフティポンプの「開始」ボタンを「停止」に切り替える。

遮光袋が必要とされる場合には袋をかけ、台に置く。



停止にすると赤い色が見えます

高カロリー輸液の交換方法 ～カフティポンプを用いた場合～

3. 輸液チューブのクレンメを閉める。



③ 充電された電池を入れ蓋をし、横の灰色部分を「閉」に上げる



4. ポンプの電池が入っている蓋をあけ、充電されている電池と交換し蓋をする。


① 横の灰色の部分を「開」に下げる



④ 外した電池を充電する

5. 新しい輸液にチューブを差し替える。

② 蓋をあけ、電池をとる

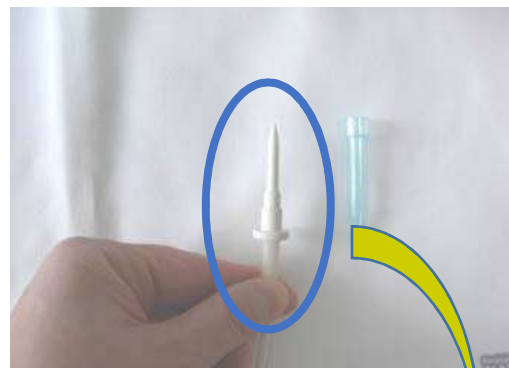

高カロリー輸液の交換方法 ～カフティポンプを用いた場合～

6. 輸液量を確認する

① 数字を確認する



1時間あたりの輸液量が表示されます

② 流量の変更がある場合は設定ボタンを押す



+は流量を上げる
-は流量を下げる


7. 輸液チューブのクレンメを開ける。



8. 再度輸液量を確認し「停止」ボタンから「開始」へ切り替える。



9. 輸液が流れているか確認する。

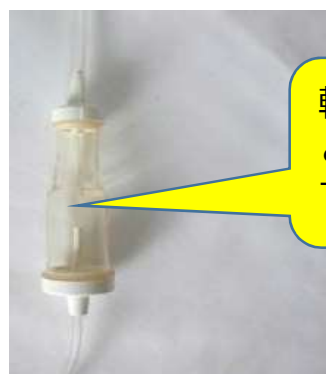

輸液がしずくとなっていて落ちていませんか？



この部分が緑色に点滅していれば大丈夫です